



Wir erkennen den Rhythmus!

custo guard holter mit custo wing

All-in-One: Modernes Langzeit-EKG mit komfortablen Patch-Elektroden

custo guard holter ist ein moderner Langzeit-EKG-Rekorder, der die Vorteile aus langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung vereint. Er zeichnet sich durch hohen Patientenkomfort aus, ist kompakt, leicht und ohne störende Kabel oder Gurte. Mit drei Kanälen, einer Bewegungs- und Schrittmachererkennung sowie einer nahezu unbegrenzten Aufzeichnungsdauer von mehreren Monaten ist der custo guard holter **die perfekte Lösung zur Erkennung von Rhythmusstörungen.**

custo guard holter: Unser
All-in-One-LZ-EKG-Rekorder!

**Einfach.
Kabellos.
Zuverlässig.**





Ihre Vorteile


- 3-kanalig mit zwei unabhängigen Ableitungen
- Komplette kabellos und perfekt für eine hygienische Anwendung
- Schnelle und stabile Gerätekommunikation und Datenübertragung
- Optimale Aufzeichnungsqualität mit der innovativen Elektrode custo wing
- Kurze Akku-Ladezeiten
- Schrittmachererkennung
- Lage- und Bewegungserkennung für Kontextinformationen
- Anlagekontrolle durch Monitoring am PC
- Bluetooth Low Energy für mobile Anwendungen
- LED-Status-Anzeige für Ladezustand und HF-Erkennung
- Schutzklasse IP65: optimal zur Desinfektion
- Sehr lange Aufzeichnungsdauer (mehrere Monate)
- Laufzeit bis zu 7 Tagen mit nur einem Akku
- Sehr klein und leicht mit nur 30 g
- Docking-Station custo base mit einem oder sechs Plätzen für die Gerätekommunikation und als Ladestation

Verschiedene Elektrodenapplikationen möglich:

- Spezielle Einweg-Elektrode custo wing: Artefaktreduzierung und Signaloptimierung durch dezentrale Anschlüsse und vollflächige Klebefläche, Material aus atmungsaktivem Vlies
- EKG-Kabel guard 3 und EKG-Kabel guard 4
- custo belt 3

Intelligentes Interface (guard holter viewer) in custo diagnostic

- Anzeige für Aufnahmebereitschaft und spezielle Gerätezustände
- Diverse Konfigurationen und Aufnahme-Modi möglich

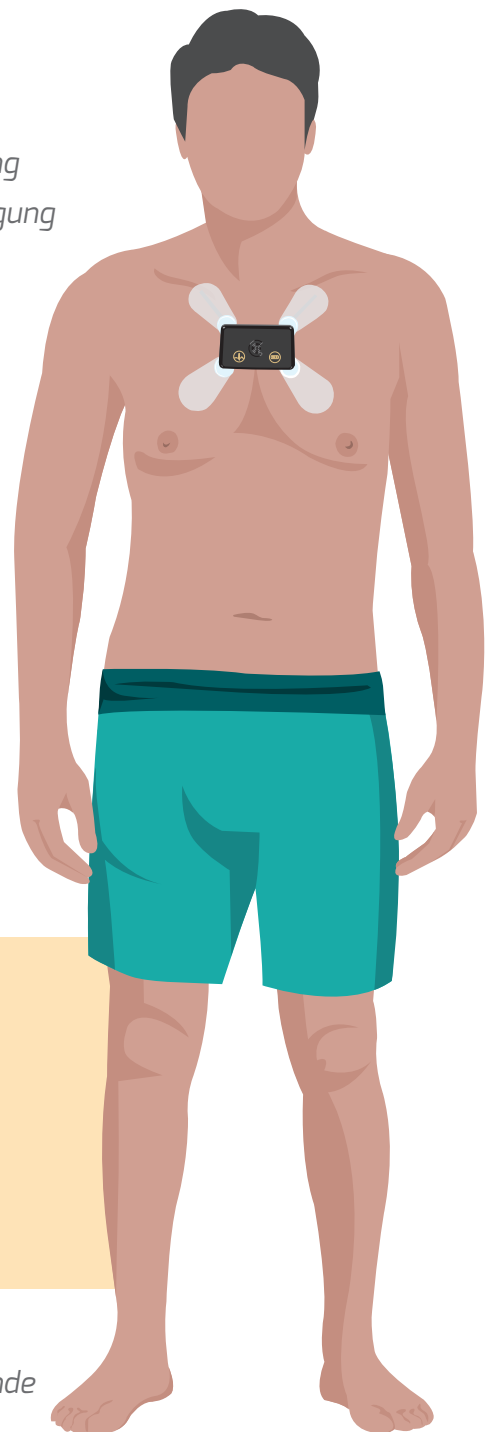

Innovative Systemlösungen seit über 40 Jahren!


Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Klinik – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.



Besuchen Sie uns auf YouTube!

www.customed.de

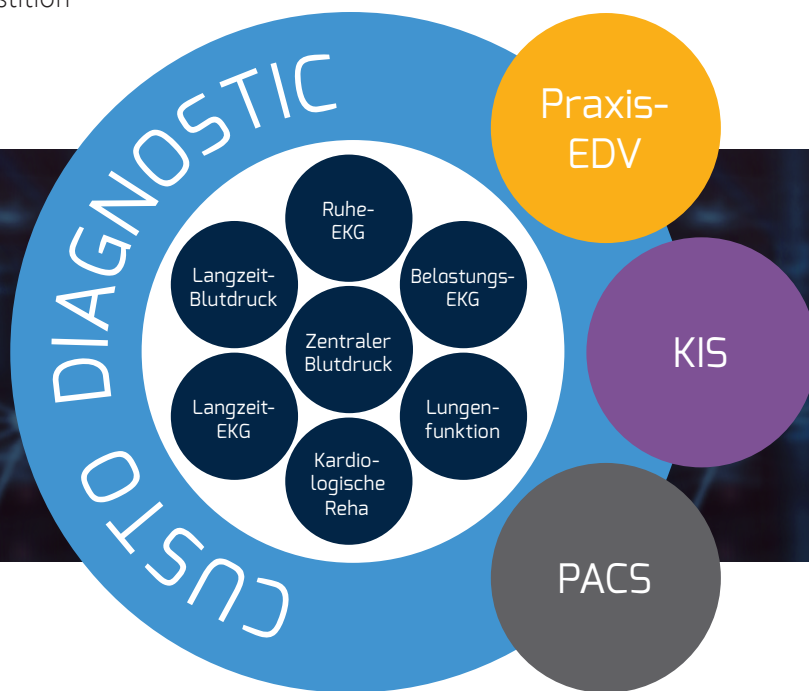

MEHR INFORMATIONEN

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 • Fax: +49 (0) 89 710 98-10
E-Mail: info@customed.de • Bitte ausfüllen und an custo med faxen, schicken oder eingescannt per E-Mail senden.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.customed.de/kontakt nutzen.



Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



MTS-05.23

Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post ☐ / per PDF ☐:

☐ Ruhe-/Belastungs-EKG

☐ Langzeit-EKG

☐ Langzeit-Blutdruck

☐ Lungenfunktion

☐ Klinik-IT

☐ Kardiologische Reha

☐ Hygienetaschen „custo clean“